

# APARAT ZA PRAŽNENJE, PRANJE I KEMIJSKU DEZINFEKCIJU NOĆNIH I URINSKIH POSUDA

## BLATEX BL-5A



### OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

**Blatex BL-5A** je aparat koji dolazi u dvije izvedbe samostalna verzija i verzija prilagođena Izlivniku, a omogućava jednostavan postupak pražnjenja, pranja i kemijske dezinfekcije svih tipiziranih noćnih i urinskih posuda.

Noćna posuda ili urinska posuda se zajedno sa sadržajem stavlja u aparat te zatvaranjem vrata automatski prazni.


Pranje i dezinfekciju kontrolira moderan mikroprocesorski programator koji omogućava jednostavno upravljanje i sigurnu kontrolu aparata.

Aparat je izrađen od nehrđajućih materijala što osigurava lijep izgled i dug radni vijek.

Uz aparat se isporučuje komplet cijevi za montažu

### Tehnički podaci

Napon:	230V, 50Hz
Snaga:	70W
Vodovodni priključak:	topla voda R 3/4" hladna voda R 3/4"
Pritisak vode:	min. 300-600 kPa (3-6 bar)
Kanalizacijski priključak:	φ110 mm u pod ili u zid
Dimenzije Š x D x V:	450 x 600 x 965 mm ili 1045 uz Izlivnik IZ-2
Masa:	cca. 40 kg

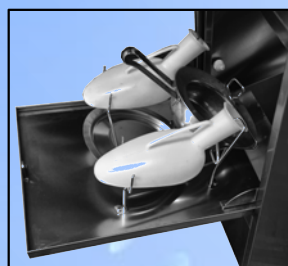

Proizvođač:

**GRINOX** Slovenija - EU

Prodaja i ovlaštenu servis:

**MEDIS**


P. D. Kalea 9, Zagreb

Web: [www.medis.hr](http://www.medis.hr)

✉ [medis@medis.hr](mailto:medis@medis.hr)

Tel: 01/3776-618 Fax: 01/3757-871

Mob: 095/9030 888, 095/9030 999

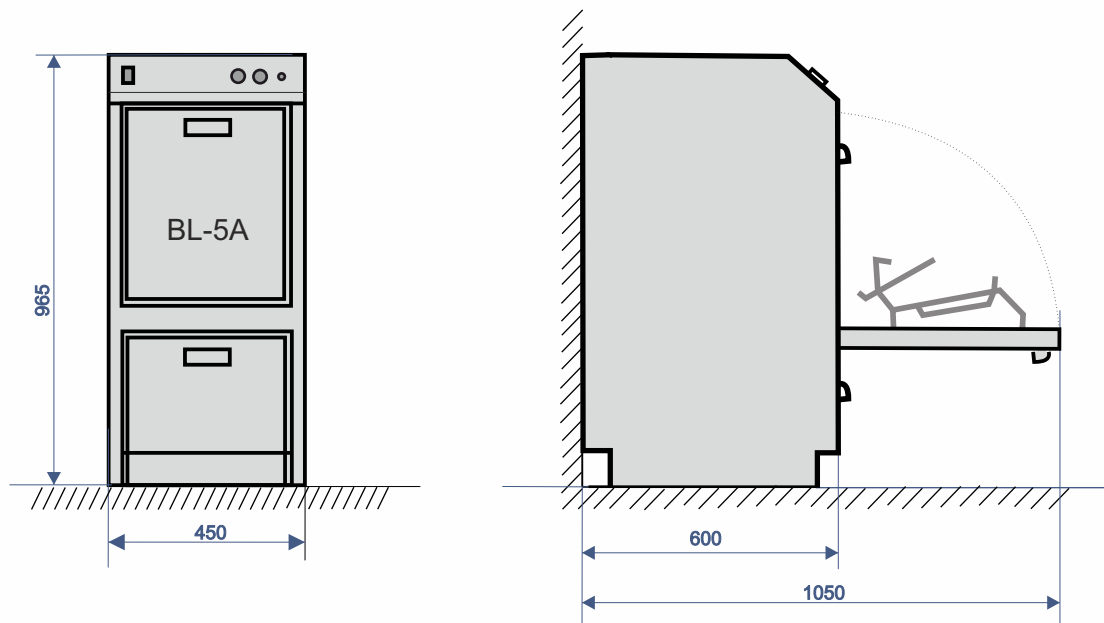

<b>Funkcija</b>	pražnjenje, pranje i kemijska dezinfekcija svih tipiziranih noćnih posuda i poklopaca, urinskih posuda, lavora, princeza i dr.
<b>Opis pranja</b>	automatsko , mikroprocesorski kontrolirano (elektronski programator) hladnom i toplom vodom i u pranju i u ispiranju pomoću 7 fiksnih šprica + 2 rotirajuće , automatsko određivanje količine vode, tihi rad, pasivno sušenje
<b>Opis dezinfekcije</b>	automatska, kemijska, vrućom vodom, mikroprocesorski kontrolirana, dezinficijensom iz vlastitog rezervoara kojega u komoru ubrizguje peristaltična pumpa i injektor
<b>Opis stavljanja noćnih, urinskih i ostalih posuda u aparat</b>	sa kompletnim sadržajem u standardni univerzalni nosač na vratima (koja su sa prednje strane aparata), a čijim se zatvaranjem sadržaj automatski istresa u aparat.
<b>Kapacitet pranja</b>	jedna noćna posuda sa poklopcem ( sve vrste tipiziranih posuda) i/ili dvije urinske posude, jedan lavor za stolac (princeza) ili bubrežasta zdjelica
<b>Upravljanje aparatom</b>	pritiskom na gumb odgovarajućeg programa noćne ili urinska posude (normalno ili intenzivno) započinje pranje i dezinfekcija , indikacija izbora i trajanja programa
<b>Trajanje ciklusa pranja i dezinfekcije</b>	cca. 4 minute za noć nu posudu, 3 min. za urinske posude, automatsko isključivanje , pasivno sušenje
<b>Sigurnost</b>	zaštita od nenamjernog otvaranja vrata prekidom programa, u slučaju prekida programa ciklus počinje od početka, hermetičko brtvljenje vrata silikonskom brtvom te labirintnim preklapanjem
<b>Materijal izrade</b>	u cijelosti iz nehrđajućih materijala (kućište i komora Inox AISI 304)
<b>Dimenzije ŠxVxD</b>	450 x 965 bez Izlivnika /1050 uz Izlivnik x 600 mm (Š x V x D)
<b>Priključci na vodu</b>	ventili za hladnu i toplu vodu ¾" ili ½"
<b>Vodovodni pritisak</b>	3-6 bara
<b>Priključak na kanalizaciju</b>	u pod ili zid promjera 110 mm
<b>Priključak na struju</b>	220VAC, 50Hz, 70W
<b>Masa</b>	40 kg
<b>Rezervoar dezinficijens</b>	5 L, dostatno za cca. 150 pranja
<b>Isporuka</b>	aparat sa kompletnim materijalom za montažu