


Hygiene ohne Kompromisse



Hygiene Plus

Polierte Edelstahloberflächen, mit Hygieneradien, ein spezieller Spülflügel mit Zusatzdüsen sorgt für optimale Reinigung und Hygiene

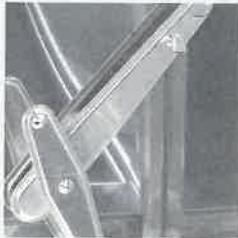

Best Bedienung

Klartextdisplay ergonomisch gestaltet für optimale Bedienung. Anzeige gibt Info über Wartung, Störung und A0-Wert in einer Textanzeige.



Wirtschaftlich

Geringe Service-, Ersatzteil- und Unterhaltskosten. Robust und langlebig.



Anwendungsbeispiele



Urinflasche und
Bettpfanne



Urinflasche und
Nachtstuhleimer



Korb für Nierenschalen
oder Kleinteile



Drei Urinflaschen



euromat basic 2015

Beschreibung der Serie EUROMAT^{basic}

Steckbeckenreinigungs- und Desinfektionsautomat zum Reinigen und Desinfizieren aller erforderlichen Pflegegeschirre in einem Arbeitsgang.

EUROMAT^{basic} ist hergestellt, konform und geprüft nach:

- DIN EN ISO 9001:2008
- DIN EN ISO 13485:2003+AC:2009
- Fertigungskonform nach Medizinprodukte-Richtlinienzertifikat gem. 93/42/EWG, Anhang II
- DIN EN ISO 15883 Teil 1 und 3
- Systemtrennung nach DIN EN 1717
- Hygienegutachten in Anlehnung an DIN EN ISO 15883

Ausstattungsmerkmale:

- **Ergonomie** – Bestückung und Bedienung in Arbeitshöhe für den Bediener.
- **Balanceautomatik** – Unterstützung beim Öffnen und Schließen der Tür.
- **Klartextdisplay** – Bedienung über Klartextdisplay. Fehlermeldungen und Wartungsintervalle in Klartext-Anzeige.
- **A0 Wert** – Individuelle Einstellbarkeit des gewünschten A0 Wertes. Werkseinstellung A0 600.
- **Programme** – Alle Programme mit A0 Wert sicherer thermischer Desinfektion.
 - Kurzprogramm:** Drei Urinflaschen (reduzierter Wasserverbrauch).
 - Normalprogramm:** Steckbecken oder Nachtstuhleimer, zusätzlich eine Urinflasche möglich.
 - Intensivprogramm:** Speziell für starke Verschmutzungen oder medikamentöse Klebestühle.
- **Thermoseal** – das neuartige Dichtsystem umschließt das Dichtprofil der Tür 3-seitig. Kein Dampfaustritt während der Desinfektionsphase.
- **Hygiene-Plus** – Spülkammer mit Hygienerradien und Kammerschütze aus Edelstahl in polierter Ausführung.
- **Reinigung** – Kreispumpe mit hoher hydraulischer Druckleistung von mehr als 3,5 bar. Minimaler Energieverbrauch, bei extrem leisem Betrieb mit Edelstahlpumpenkopf.
- **Spülsystem** – mit speziellem Planetenspülflügel 5-strahlig und 5 zusätzliche Vollkegelsprühköpfe in der Kammer aus Edelstahl.
- **Dampfsystem** – Dampfleitung und Dampfeintritt komplett aus Edelstahl.
- **Druckentlastung** – mit Kondensatableitung über Edelstahlwellrohr.
- **Leckageüberwachung** – durch Boden und Siphonsensor.
- **Universalhalterung** – vereinfachte Einbringung der Geschirre durch Universalhalterung. Edelstahl - polierte Ausführung.
- **Sicherheit** – 230 Volt Strombedarf an der Pumpe und Verdampfer, ansonsten nur 24 Volt Niederspannung. Beleuchteter Sicherheits-Not- und Trennschalter sofort erreichbar.
- **Sicherheitsverriegelung** – Sichere Verriegelung der Spülkammer durch Überwachung. Bei Stromausfall bleibt die Tür geschlossen und gibt nur desinfiziertes und zurückgekühltes Geschirr frei.

Option gegen Mehrkosten:



- UV-Desinfektion – Tank
- Edelstahlverrohrung komplett
- Technik Plus (Ventilgruppe + Edelstahlerhitzer)
- Hygiene Plus (Dampfdüse – Boden)

Anschlusswerte:

Zufluss KW und WW Panzerschläuche 3/4" Überwurf

Abfluss zentral verrohrt DN 100

Elektroanschluss 230V – 3 KW – 16 Amp.

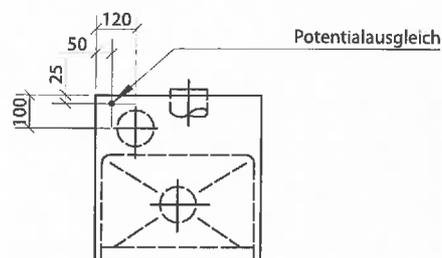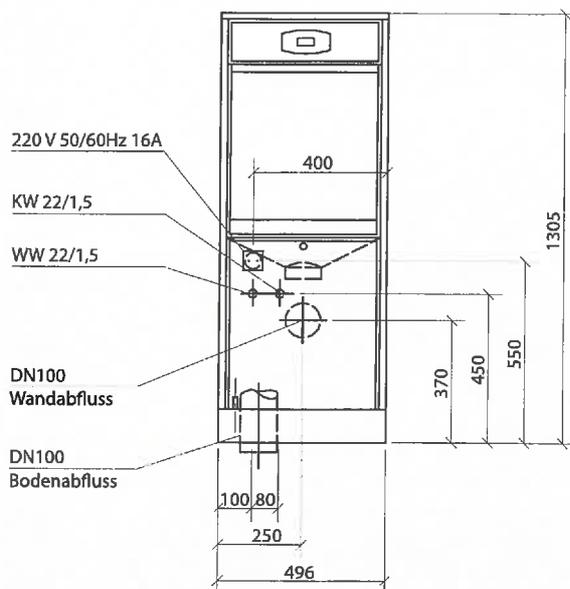

- 1 = Steckdose 230V, 50/60Hz, 16A
- 2 = Abfluss DN 100
- 3 = WW- Anschluss 1/2" IG
- 4 = KW- Anschluss 1/2" IG
- 5 = Potentialausgleich

Kundendienst

Wartung Reparatur Ersatzteile

bg-Edelstahltechnik und
Kunststofftechnik für Krankenhaus,
Industrie und Wasserwirtschaft GmbH

Karlstraße 18
D-45739 Oer-Erkenschwick

Tel.: +49 (0) 23 68 - 6 99 36 - 0
Fax: +49 (0) 23 68 - 6 99 36-33
E-Mail: info@bg-edelstahl.de

www.bg-edelstahl.de



präzision in edelstahl

bg-edelstahltechnik gmbh
karlstraße 18
45739 oer-erkenschwick
tel.: 02368/699 36-0 fax: 02368/699 36-33
info@bg-edelstahl.de